



Light and convenient




## Quick Instructions

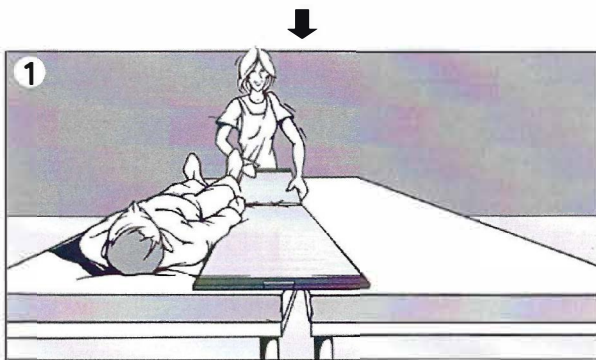


1 Position "Rollbord"

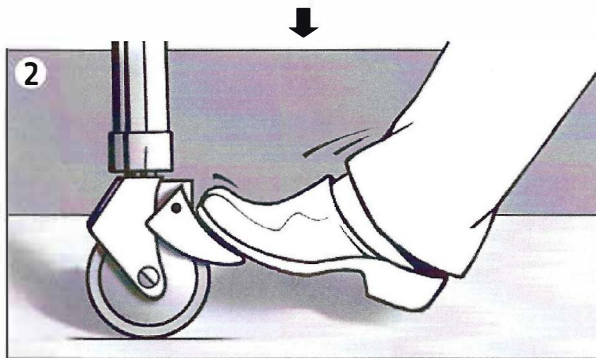


2 Lock brakes

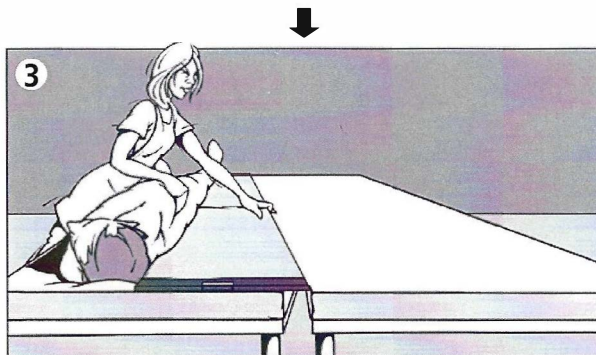


3 Turn patient to side

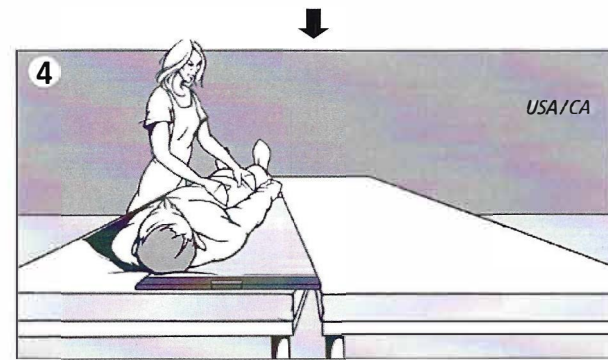

4 Move "Rollbord" and ease patient back

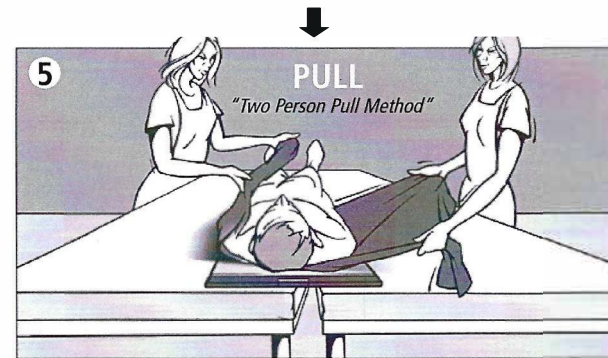

5 Pull patient over "Rollbord"

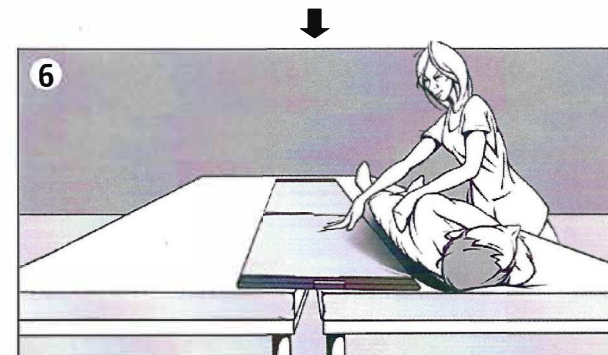

6 Turn patient and remove "Rollbord"

"Disinfection" see back

Protection & Cleaning →

## Preparation and disinfection of "Samarit Rollbord" devices

According to recommendation and the Guidelines for Hospital Hygiene and Infection Prevention, contamination with viruses/bacteria such as MRSA, ELBL and VRE must be prevented.

We recommend the following measures:

### 1. Use the disposable Samarit protective cover

This PE film covers the entire product and absorbs impurities, so that the Rollbord surface stays clean.

### 2. Wipe disinfection cont: 10-20% Isopropanol

Wipes e.g. the "Sani-Cloth® Active" or similar.

Chemical and thermal procedures are **not suitable**. Chlorine, concentrates and bleaches do harm materials and are used at your own risk.

## Préparation et désinfection des systèmes «Rollbords Samarit»

Conformément aux directives sur l'hygiène dans le domaine hospitalier ainsi que sur la prévention des infections, toute transmission de virus ou de bactéries (SARM, ELBL, ERV, etc.) doit être évitée.

Nous recommandons les mesures suivantes :

### 1. Utilisation d'une housse de protection jetable Samarit

Ce film de protection enveloppe l'intégralité du produit et piège les impuretés afin que la surface du Rollbord reste propre.

### 2. Désinfection par essuyage cont : 10-20% Isoproapnol

Lingettes : p. ex. "Sani-Cloth® Active" ou similaire.

Les traitements suivants ne sont pas adaptés : procédés chimiques et thermiques, chlore, produits concentrés, agents blanchissants.

## Preparación y desinfección de los sistemas de "Samarit Rollbord"

De acuerdo con las recomendaciones con las Directivas sobre Higiene hospitalaria y prevención de enfermedades contagiosas, es preciso prevenir la transmisión de virus y bacterias, como por ejemplo, MRSA, ELBL, VRE etc.

Se recomienda adoptar las siguientes medidas:

### 1. Empleo de la funda protectora de un solo uso de Samarit

Esta cubierta protectora envuelve todo el producto y atrapa las impurezas hasta limpiar la superficie de la Rollbord.

### 2. Desinfección por frotamiento cont. 10-20% Isopropanol

Con paños por ejemplo, „Sani-Cloth® Active" o similar.

Es inadecuado el uso de: procesos químicos y térmicos, cloro, concentrados o agentes blanqueadores.



Disposable Cover

